


Приложение 1
Схема сборки изделия

Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025

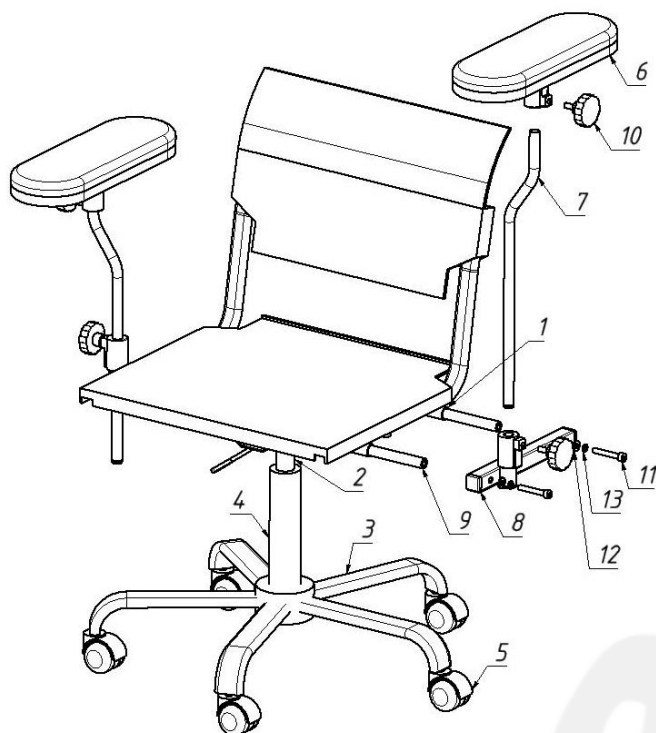

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Основание в сборе	1
2	Газлифт	1
3	Крестовина	1
4	Накладка для крестовины	1
5	Колесо D50мм	5
6	Основание подлокотника	2
7	Кронштейн гнутый	2
8	Кронштейн основания	2
9	Стяжка	2
10	Маховик	4
11	Болт М8х50	4
12	Шайба Т8	4
13	Шайба гроверная Т8	4

Для сборки потребуется киянка, шестигранный ключ 6мм

1. Распаковать компоненты кресла. Вытащить из Основания кресла (Поз.1) 4 заглушки D20мм.
2. Установить в отверстия на Крестовине (Поз.3) Колеса D50мм (Поз.5). Вставить Газлифт (Поз.2) в стакан Крестовины (Поз.3).
3. При помощи киянки осадить газлифт (Поз.2), ударяя с усилием по корпусу газлифта (Поз.2) с 4-х сторон. Закрыть конструкцию Накладкой для крестовины (Поз.4).
4. Надеть Основание в сборе (Поз.1) на свободную часть Газлифта (Поз.2).
5. Вставить Стяжки (Поз.9) в трубку Основания в сборе (Поз.1). Закрепить кронштейн основания (Поз.8) к Стяжке (Поз.9) при помощи Болта М8х50 (Поз.11) через Шайбу Т8 (Поз.12) и Шайбу гроверную Т8 (Поз.13).
6. Вставить Кронштейн гнутый (Поз.7) в Основание подлокотника (Поз.6) зафиксировать Маховиком (Поз.10) в необходимом положении.
7. Вставить Кронштейн гнутый (Поз.7) в Кронштейн основания (Поз.8) зафиксировать Маховиком (Поз.10) на необходимой высоте.

ООО Медицинская Компания «АСК»



Кресло для забора крови и терапевтических процедур

СТП-Р-1.02

по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025

Паспорт

СТП-Р-1.02.ПС

г. Нижний Новгород

версия 2.0

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Приложение 1

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025

Дата изготовления: _____
месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-009-68690950-2025 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

Упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 32.50.30-009-68690950-2025.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. № 1

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

Критерием предельного состояния изделия является технико-экономическая нецелесообразность его восстановления.

5.2. Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.2 Транспортирование кресел морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при температуре воздуха плюс 25°C.

5.2.4 Изделие должно храниться в упаковке на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C и относительной влажности до 98% при температуре воздуха плюс 25°C, в вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

Допускается хранение изделия по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при температуре воздуха плюс 25°C..

5.2.5 Хранение мебели в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.2.6 В помещении для хранения изделия не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, разрушающих покрытия

5.3. Утилизация

5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса, или после завершения срока эксплуатации изделия.

5.3.2 Утилизация изделий должна производиться в соответствии с установленными нормами и правилами РФ, действующими на момент утилизации.

5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684–21 для отходов класса А, и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

5.4. Гарантии изготовителя

5.4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

5.4.3 Гарантийный срок хранения изделий в упакованном виде - 12 месяцев. 4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025. Далее по тексту – Изделие, Кресло.

Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025.

Номер ЕРУЛ Г004-00110-00/04547496

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия указана в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Кол-во, шт.
1. Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025, в составе: 1.1. Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 – 1 шт., в составе: 1.1.1. Основание в сборе – 1 шт.; 1.1.2. Газлифт – 1 шт.; 1.1.3. Крестовина – 1 шт.; 1.1.4. Накладка для крестовины – 1 шт.; 1.1.5. Колесо -5 шт.; 1.2. Комплект подлокотников – 1 шт., в составе: 1.2.1. Основание подлокотника -2 шт.; 1.2.2. Кронштейн гнутый – 2 шт.; 1.2.3. Кронштейн основания – 2 шт.; 1.2.4. Стяжка – 2 шт.; 1.2.5. Маховик – 4 шт.; 1.2.6. Болт М8х50 – 4 шт.; 1.2.7. Шайба Т8 – 4 шт.; 1.2.8. Шайба гроверная Т8 – 4 шт.;	1
Эксплуатационная документация	
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

2.4 **Назначение изделия:** Кресло для забора крови и терапевтических процедур предназначено для поддержания и расположения пациента или медицинского работника в сидячем положении с целью

обеспечения удобного положения во время общедиагностического обследования, консервативного лечения, хирургических и терапевтических процедур, или забора крови.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 группа 2.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры, масса изделия

Модель	Габаритные размеры изделия ШхГхВ, мм.	Масса изделия кг	Диапазон изменения высоты сиденья, мм	Размер сиденья, ДхШ, мм	Диаметр колес, мм	Диапазон изменения высоты подлокотника (относительно кронштейна основания) мм
Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025	(765±39)х (600±30)х ((805±40)÷ (945±47))	10,1±0,5	140±10	460±23х 420±21	50±2,5	(200±20)÷ (400±20)
Нагрузка на сиденье не более 100 кг						

3.2 Общий вид изделия и его конструктивные особенности приведены на рисунке 1.

Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025

Внешний вид модели представлен на рис. 1. Конструкция кресла для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02 представляет собой основание со спинкой (поз. 2, рис. 1) и сиденьем (поз. 1, рис. 1). Регулировка высоты кресла осуществляется при помощи газлифта (поз. 5, рис. 1). Кресло установлено на колеса (поз. 6, рис. 1). Положение основания подлокотников (поз. 3, рис. 1) регулируется по высоте и вокруг своей оси при помощи маховиков (поз. 4, рис. 1).



Рис. 1. Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02
по ТУ 32.50.30-009-68690950-2025

*1- Кресло для забора крови и терапевтических процедур СТП-Р-1.02-П. 2-Основание подлокотника.
3- Маховик. 4 – Газлифт. 5- Колесо.*

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 4.1 Перед применением медицинского изделия убедиться, что подлокотник надежно закреплен путем затягивания маховика, основание стула прочно и устойчиво, без перекоса установлено на полу.
- 4.2 Во время регулировки положения подлокотника, необходимо дополнительно его придерживать.
- 4.3 До начала процедуры необходимо отрегулировать положение кресла под пациента или медицинского работника.
- 4.4 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и других химических соединений, способных разрушить покрытие изделия).
- 4.5 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами
- 4.6 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями
- 4.7 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 4.8 Не допускайте раскачивания и ударов изделия.
- 4.9 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 4.10 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 4.11 Не допускается применение изделия не по назначению: использовать как инвентарь для работы на высоте, т.е. в качестве подставки, стремянки и т.д.
- 4.12 Запрещается использовать медицинское изделие как опору для передвижения пациента или медицинского работника с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 4.13 Медицинское изделие необходимо переносить через пороги и другие препятствия удерживая за каркас.

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Срок службы

5.1.1. Средний срок службы - 5 лет.