

ПАСПОРТ

**Стол для груминга S2 складной
120x60x80 см на толстых ножках**



**wikiGROOM**

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ | 4 |
| 2. ОПИСАНИЕ..... | 4 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ..... | 6 |
| 6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ | 8 |
| 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 8 |
| 8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ | 8 |
| 9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ | 9 |
| 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 9 |
| 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ..... | 11 |
| 12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА | 11 |

Стол для груминга S2 складной на толстых ножках

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стол для груминга S2 складной на толстых ножках (далее изделие) предназначен для проведения комплексного косметического осмотра и ухода за домашними животными.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из толстого металла с использованием качественной фурнитуры.

2.3. Материал столешницы – МДФ.

2.4. В ножках стола находятся регулируемые опоры, которые позволяют компенсировать неровности пола.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

| | |
|---|----------|
| Длина стола, мм | 1200 |
| Ширина стола, мм | 600 |
| Высота стола, мм | 800 |
| Масса стола, кг | 12,7±0,5 |
| Максимально допустимая нагрузка, не более, кг | 70±5 |

3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке

**поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ
30.12.1998 г.**

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающим значение, установленное в настоящем паспорте.

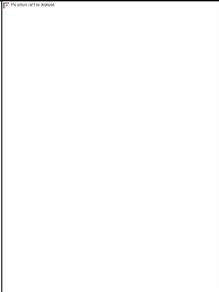
4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

| № | Наименование | Количество, шт. | Изображение |
|---|-------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Стол для груминга S2 складной | 1 |  |
| 2 | Кронштейн Г-образный | 1 |  |
| 3 | Струбцина | 1 |  |
| 4 | Ринговка | 1 |  |
| 5 | Паспорт | 1 | - |

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

6.1. После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

6.2. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

7.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

7.3. Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

7.4. Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

7.5. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р

50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 °С до +50 °С без конденсации влаги.

8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с

отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол для груминга S2 складной на толстых ножках соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____/_____/20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие
медицинской
техники Стол для груминга S2 складной на толстых ножках
(наименование
и тип)

Серийный
номер _____

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____/_____/20 ____ г.
М.П. _____

(подпись, штамп торгующей организации)