

ПАСПОРТ

Стол для груминга S801 с электрическим подъемником,
розетками и органайзером



 wikiGROOM

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОПИСАНИЕ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	6
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	7
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	8

НАЗНАЧЕНИЕ

Стол для груминга S801 с электрическим подъемником, розетками и органайзером (далее изделие) предназначен для проведения комплексного косметического осмотра и ухода за домашними животными.

ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

Каркас изделия изготовлен из из толстого металла с использованием качественной фурнитуры.

Материал столешницы – прорезиненное покрытие, МДФ.

В ножках стола находятся регулируемые опоры, которые позволяют компенсировать неровности пола.

На столешнице имеется универсальная розетка для подключения электроприборов.

Высота стола регулируется электроприводом. Электропривод приводится в действие от ножного пульта управления.



Рис. 1 Ножной пульт управления

Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Длина стола, мм	1200
Ширина стола, мм	600
Высота стола, мм	400-950
Масса стола, кг	58±0,5
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100±5

Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.


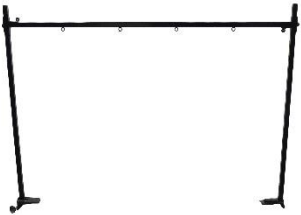


Запрещается эксплуатация неисправного изделия

Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Стол для груминга S801	1	
	П-кронштейн	1	
2	Струбцина	2	
	Ринговка тканевая	2	

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 °С до +50 °С без конденсации влаги.

Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол для груминга S801 соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____ / _____ /20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие
медицинской
техники Стол для груминга S801
(наименование и тип)

Серийный номер _____

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи
____ / _____ /20 ____ г. М.П. _____

(подпись, штамп торгующей организации)

